

Fairywill

Sonický zubní
kartáček FW-P80



NÁVOD K POUŽITÍ


Děkujeme, že jste si vybrali sonický zubní kartáček Fairywill P80. Před použitím výrobku si pečlivě přečtete návod k použití a uschovejte jej na bezpečném místě pro budoucí použití.

1.Vlastnosti:

- Voděodolná a protiskluzová konstrukce.
- Vyměnitelné hlavice kartáčku s jedinečným 3D tvarem štětín a funkcí připomínání výměny štětín pomáhají udržovat bělejší a zdravější zuby.
- Vysokofrekvenční vibrace účinně odstraňují zubní plak, zajišťují hloubkové čištění zubů a dásní a zabraňují vzniku zánětu dásní.
- Díky indikátoru tlaku uživatelé poznají, kdy je tlak na jejich zuby příliš silný.
- Nabíjení přes USB, vhodné na cesty a kompatibilní s celosvětovým napětím.
- Funkce připomenutí slabého napájení, když je napětí baterie nízké, indikátor rychle bliká nebo se kartáček během používání nemůže zapnout, což uživatelům připomíná, aby kartáček dobýjeli.
- Inteligentní 2minutový časovač s intervalovou pauzou, který každých 30 sekund připomene změnu místa čištění zubů.
- K dispozici je 5 režimů: Bílý, Čistý, Citlivý, Leštící a Masážní nastavení zabudované v zubním kartáčku. V zubním kartáčku je také zabudována funkce paměti režimů, což znamená, že po zapnutí zubního kartáčku zůstane výchozí počáteční režim stejný jako režim nastavený při posledním vypnutí zubního kartáčku.

2.Součásti kartáčů:

- 1 - Kartáčová hlava
- 2 - Indikátor tlaku
- 3 - Tlačítko ON/OFF
- 4 - Bílý
- 5 - Čištění
- 6 - Citlivý
- 7 - Leštění
- 8 - Masáž
- 9 - Indikátor nabíjení
- 10 - Nabíjecí port

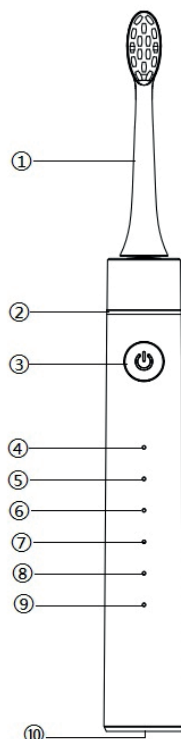

3. Činnosti spojené s použitím zubního kartáčku:

☆ Používání zubního kartáčku

- Zasuňte hlavu kartáče do rukojeti a zkontrolujte, zda je zajištěna ve správné poloze.
- Zubní kartáček zapněte stisknutím tlačítka "Power".
- Stisknutím tlačítka "Power" přepínáte mezi 5 režimy ("White", "Clean", "Sensitive", "Polish" a "Mas-sage").
- Navlhčete štětiny zubního kartáčku a naneste na něj přiměřené množství zubní pasty.
- Přiložte štětiny se zubní pastou k zubům v mírném úhlu směrem k linii dásní.
- Jemně klouzejte hlavou kartáčku po přední, zadní a všech žvýkacích plochách zubů. Kartáček by měl po zubech klouzat s minimálním tlakem. Nevyvíjejte příliš velký tlak na zuby/dásně ani nepřikládejte štětiny na jednu oblast úst po delší dobu.

- Pokud je tlak na zuby uživatele ≥ 250 g, indikátor tlaku se rozsvítí červeně, aby uživateli připomněl, že má být při čištění opatrný nebo že má přepnout na režim, který mu vyhovuje.
- Zubní kartáček je vybaven dvouminutovým chytrým časovačem, protože tuto dobu doporučují zubní lékaři jako optimální dobu pro čištění zubů, a po každých 30 sekundách se zobrazí pauza, která uživateli připomene, aby přešel na jiný kvadrant úst.
- Jakmile ucítíte pauzu, přejděte na další část a zubní kartáček se po 2 minutách automaticky vypne.
- Abyste zabránili rozstříknutí zubní pasty, zapínejte zubní kartáček pouze tehdy, když jej přikládáte k zubům, a vyjměte jej z úst až po vypnutí.

☆ Výměna hlavy zubního kartáčku

Instalace: Zatlačte hlavu kartáče směrem dolů k rukojeti. Ujistěte se, že je ve správné poloze.

Odmontování: Pevně držte rukojeť a poté vytáhněte hlavu kartáče z rukojeti.

☆ Nabíjení zubního kartáčku

- Pokud zubní kartáček při prvním zapnutí ukazuje vybitou baterii, ujistěte se, že je před použitím plně nabitý.
- Pokud zubní kartáček nebyl používán déle než 3 měsíce, před použitím jej plně nabijte podle pokynů k nabíjení.
- Pokud indikátor během používání rychle bliká, znamená to, že zubní kartáček má vybitou baterii, měli byste ji co nejdříve dobít.
- Když se chystáte zubní kartáček nabíjet, zasuněte USB kabel do nabíjecího portu na spodní straně zubního kartáčku a ujistěte se, že je kartáček bezpečně připojen k elektrické síti.
- Během procesu nabíjení se indikátor nabíjení rozsvítí bíle a bude pomalu blikat. Když je baterie plně nabitá, indikátor se rozsvítí

po dobu dvou minut a přestane blikat a po dvou minutách se automaticky vypne. Jakmile je kartáček plně nabitý, lze jej používat dvě minuty na jedno sezení, dvakrát denně po dobu 30 dnů.

- Zubní kartáček je vybaven funkcí vodotěsnosti, takže je bezpečné jej používat v koupelně.

☆ Režimy

- První režim: Bílá

V tomto režimu se rozsvítí bílý indikátor v poloze "White", náklon zubního kartáčku je vysoký a intenzita vibrací je nejsilnější. Je vhodný pro uživatele, kteří mají vysoké požadavky na čisticí výkon a nemají citlivé zuby.

- Druhý režim: Clean

V tomto režimu se bílá kontrolka rozsvítí v poloze "Clean", pohyb kartáčku je normální a intenzita vibrací střední. Je vhodný pro standardní stav ústní dutiny, aby se dosáhlo nejsilnějšího čisticího účinku a udržovala se zdravá ústní hygiena.

- Třetí režim: Sensitive

V tomto režimu se bílá kontrolka rozsvítí v poloze "Sensitive", pohyb kartáčku je jemný a intenzita vibrací je nejšetrnější ze všech pěti režimů, což je vhodné pro uživatele s citlivými zuby.

- Čtvrtý režim: .

V tomto režimu se bílá kontrolka rozsvítí v poloze "Polish", pohyb štětín a intenzita vibrací se rychle mění. Simulovaný efekt lze využít k dodatečnému ošetření oblasti řezáků, což vede k bělícímu efektu.

- Pátý režim: Masáž

V tomto režimu se v poloze "Massage" rozsvítí bílá kontrolka a pohyb štětin a intenzita vibrací se pomalu mění.

Tento režim se používá k jemné stimulaci pro udržení silných a zdravých dásní.

4.Specifikace:

Provozní teplota: 0-50 °C

Provozní napětí: DC3,7 V

Materiál kartáčů: Nylon

Vstupní napětí: DC5,0V

Jmenovitý výkon: 2W

Stupeň vodotěsnosti: VODOTĚSNOST: IPX7

5.Bezpečnostní opatření:

- Výrobek bez povolení nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
- Osoby se závažným onemocněním parodontu nebo po chirurgickém zákroku v dutině ústní by se měly před použitím poradit s lékařem.
- Děti, kojenci a osoby neschopné manipulace by měly být pod dohledem rodiče nebo dospělé osoby.
- Výrobek nenamáchejte na delší dobu do vody.
- Zubní kartáček neumísťujte do horkých prostor a nevystavujte jej slunečnímu záření.
- Netlačte štětiny pevně na zuby nebo dásně.
- Není vhodné pro děti mladší 12 let.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoliv odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Pro akumulátory LI-ION

Spotřebič je vybaven LI ION (lithium-iontovým) akumulátorem, který v důsledku své finanční a chemické struktury časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu přístroje v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro přístroj a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybíjet baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Pro baterie LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která vzhledem ke své finální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro zařízení a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybíjet baterii pod 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň jejího nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.